

---

# TRICHOTRACK LITE

---

## 安装手册

1.0 版

版本	日期	作者	更改描述
1.0	2024 年 2 月 26 日	刘晓星	初次创建文档



## 1 安装要求

在安装 TrichoTrack Lite 之前，请确保您的设备满足以下要求：

### 1.1 系统要求

- 平板电脑：iPad 第 10 代或更高，iPad Air 第 5 代或更高。
- 操作系统：iPadOS 17.3 或更高。
- 网页浏览器：操作系统 iPadOS 上的默认网页浏览器 Safari。

### 1.2 互联网连接

TrichoTrack Lite 需要保持互联网连接，以进行更新和数据同步。请确保您的设备能够顺畅地访问互联网。

### 1.3 数码显微镜兼容性

TrichoTrack Lite 需要连接一个数码显微镜。目前，仅支持以下这一款型号：

#### I. Plugable 3691 60x-250x Digital Microscope


- 需要带有 USB 2.0 and USB-C 二合一的连接线。

为了得到准确的头皮扫描数据，请确保您使用的是以上型号的数码显微镜。


## 2 安装说明

打开苹果 Safari 网页浏览器，按照以下步骤开始安装。


1. 前往网址：<https://thriving-lokum-87d5f6.netlify.app/>。点击位于网址栏右侧的方形图标以开始安装应用程序。

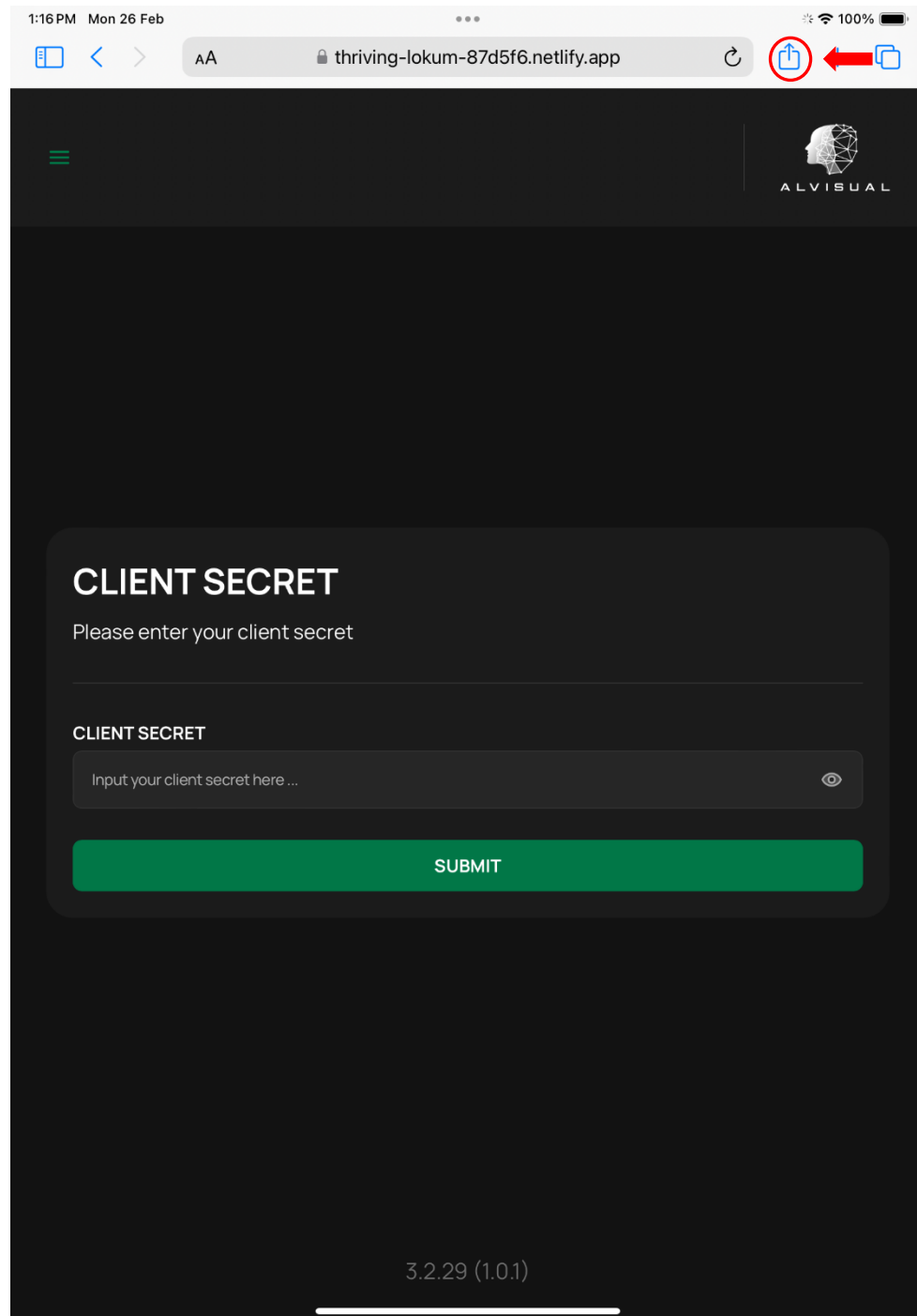

2. 在下拉菜单中点击 'Add to Home Screen' 。

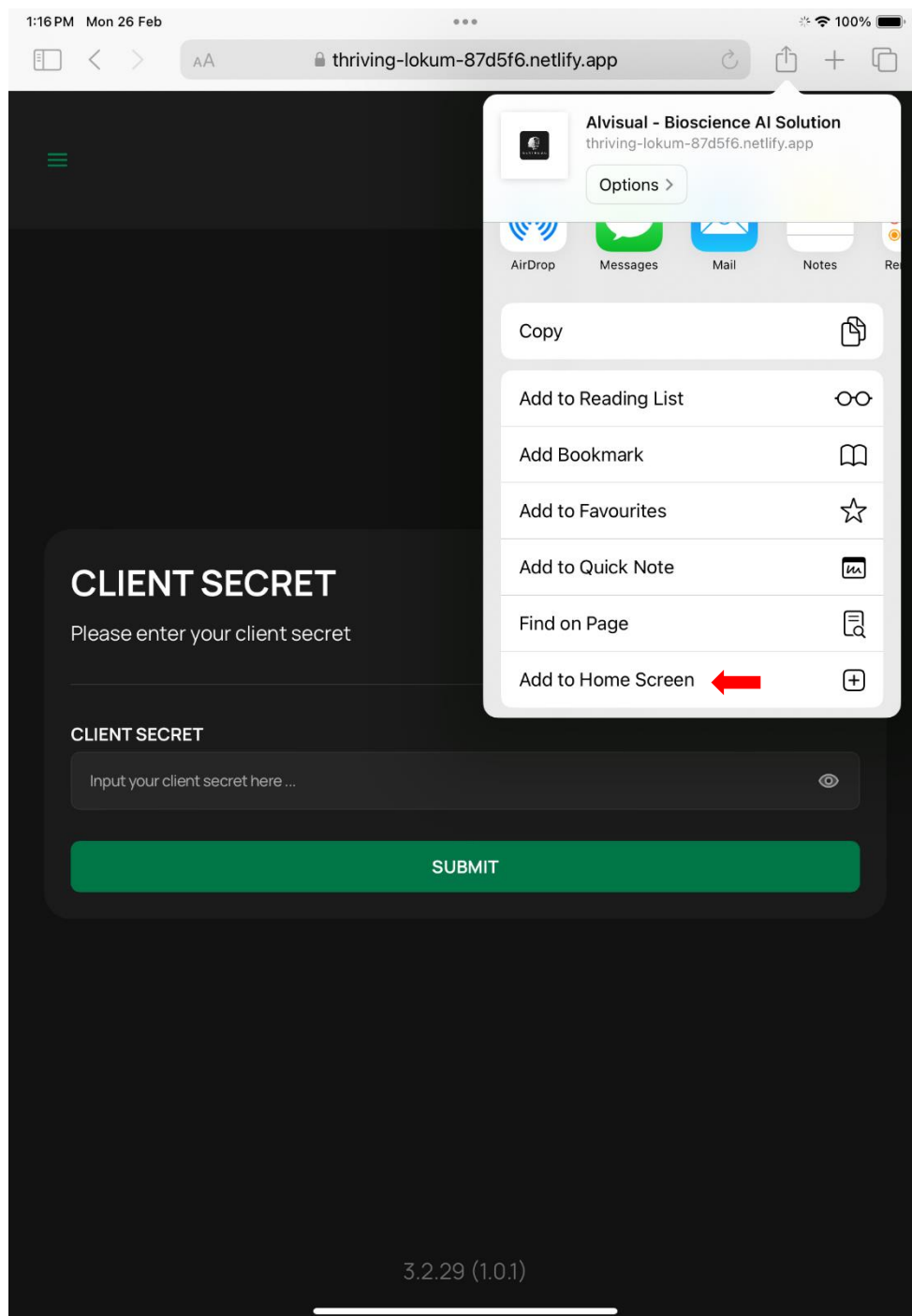

3. 一个对话框将会弹出，点击 'Add' 按钮将 TrichoTrack Lite 应用程序添加到 iPad 的桌面上。

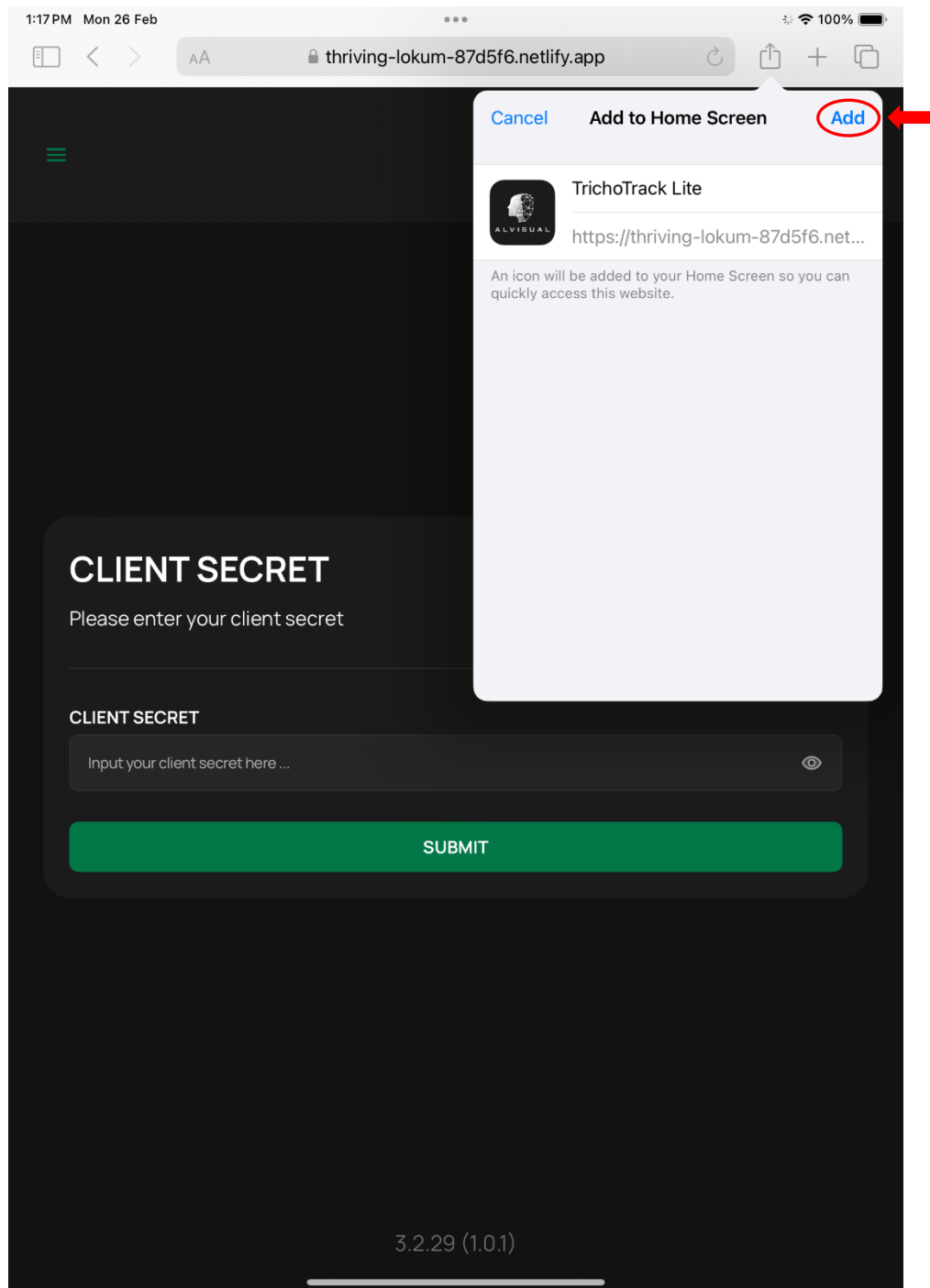



安装过程现在已经完成。您将在桌面上发现一个新的应用程序图标 'TrichoTrack Lite'。  
要启动 TrichoTrack Lite，只需双击这个图标。为了获得更好的体验，请以竖屏模式运行。

